

Nazwy elementów



Sposób użytkowania

- Tryb Adapter
(1) Podłącz adapter prądu stałego do gniazda.
(2) Podłącz zasilacz prądu stałego do gniazdka sieciowego.


- Tryb baterijny
1) Włącz Dr Pen bezpośrednio z całkowicie naładowanym akumulatorem.
2) Aby naładować baterię: Podłącz zasilacz do gniazdka i podłącz go do ładowarki. Lampka wskaźnika baterii zaświeci się na czerwono. Kontrolka zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu.



- 3) Bateria ładuje się całkowicie do około 4 godzin.
4) Baterię można naładować podczas pracy.

Sposób użytkowania

- Przygotowanie
(1) Wyjmij igłę ze sterylnego opakowania.
(2) Dopasowując okrągłe sloty 1 do 2 urządzenia, popchnij kartridż z igłą poziomo do końca.
(3) Zablokuj kartridż, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

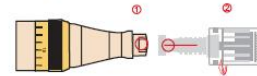

- (4) Regulację długości igły należy wykonać po włączeniu urządzenia.
(5) Jeśli chcesz wyjąć kartridż z igłami, obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wypchnij poziomo, dopasowując okrągłe szczeliny (slot1 .slot2) do siebie.

- Dostosowanie długości igły
Możesz dostosować długość igły, obracając pierścień regulacyjny w prawo lub w lewo. Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara spowoduje, że jego długość będzie większa. Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje, że jego długość będzie mniejsza.



Sposób użytkowania

- Dostosowanie prędkości igły
(1) Regulacja prędkości i WL./WYL.



- (2) 5-stopniowa regulacja prędkości
Naciskaj przycisk przez 2 sekundy by uruchomić urządzenie. Poziomy prędkości rozpoczynają się od najniższego do najwyższego, po pierwszym włączeniu zasilania. Cykl prędkości od niskiej do wysokiej.

Jeśli chcesz zatrzymać urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Migotanie przycisku zwiększa się wraz z wzrostem prędkości.

Tabela referencyjna

OBSZAR	CIENKA SKÓRA	GRUBA SKÓRA
Czoko	0,25 - 0,5 mm	0,5 - 0,75 mm
Pomiędzy brwiami	0,25 - 0,5 mm	0,5 - 1,00 mm
Nos	0,25 mm	0,5 mm
Obwarz oczu	0,25 mm	0,25 - 0,5 mm
Kość policzkowe	0,5 mm	0,5 - 1,00 mm
Polki i broda	0,5 - 1,0 mm	1,0 - 2,00 mm
Górną wargę	0,25 mm	0,25 - 0,75 mm
Blizny twarzy	1,0 - 1,25 mm	1,5 - 2,00 mm
Rozstępny	1,5 - 2,0 mm	1,5 - 2,00 mm
Blizny medyczne i oparzeniowe		2,0 - 2,50 mm

Gwarancja

- Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z www.permanent24.pl
- Zapewniamy serwis urządzenia w przeciągu od 1 do 14 dni od chwili otrzymania urządzenia wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
- Nie objęte gwarancją są: uszkodzenia mechaniczne, złamanie kabla, przepalenie zasilacza.

Specyfikacja

1. **Urządzenie**
Aparaty do stosowania terapii mikroigłowej oraz makijażu permanentnego za pomocą wibracji.

2. **Klasyfikacja**
- Rodzaj zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: Urządzenie klasy II
- Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: Stosowana część pływająca

3. **Specyfikacja**
1) Nazwa produktu: Auto-stamp Motor Meso Machine
2) Nazwa modelu: Ultima M5-W
3) Adapter: 5V, 1000mA
4) Waga: Pen 76g
5) Rozmiar: 150x23 (mm)

Producent / importer

Importer: TRADERON
ul. Kiełkowskiego 3d/42, 02-962 Warszawa, Polska
VAT: PL6711009139

Środki ostrożności

⊘	Przed użyciem przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z opisem.
⚠	Nie używaj urządzenia na osobach w następujących sytuacjach: 1. Kłótnie mają przewlekłą chorobę lub gorączkę powyżej 38 °C 2. Kłótnie mają alergię / łuszczykę 3. Kłótnie mają infekcję skóry 4. Kłótnie mają wysoki ciepło wewnętrzne 5. Kłótnie regularnie odbijają się szpilki 6. Kłótnie przyjmują leki 7. Kłótnie mają mniej niż 12 lat.
⊘	Nie używaj urządzenia do zasilania innego niż AC 220 V. Może to spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia.
⊘	Nie należy używać w pobliżu mając o wysokiej temp., zapaleniu lub wilgotności (W pobliżu nieważaczy) Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
⊘	Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
⊘	Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj kabli zasilających mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
⊘	Nie używaj przewodów pozbawionych izolacji lub przetargu. Może to spowodować porażenie prądem (niektóre go wyeliminuj na inny).
⊘	Nie używaj przewodów, który nie pełniąca lub przetargu. Może spowodować porażenie skóry.
⊘	Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka.
⊘	Przeprowadź kontrolę urządzenia. Jeśli zostanie zdiagnozowana jakiegokolwiek problem, napraw je.
⊘	Nikt inny niż operator nie może dotykać urządzenia. Może to spowodować wypadek lub awarię.

Specyfikacja

~	Prąd przemienny	EN	Numer seryjny
—	Prąd stały	CE	Reprezentacja UE
II	Sprężak klasy II	CE	Symbol CE
⚠	Uwaga, zapoznaj się z dok. towarzyszącymi	⚙	Producent
Ⓜ	Data produkcji	Ⓜ	Zastosowana część pływająca

Konserwacja

1. **Ogólne zasady konserwacji**
- Pozostawiaj urządzenie z wyłączonym zasilaniem.
- Wytrzyj jego powierzchnię suchą szmatką.
- Przechowuj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury i wilgotności.
- Nie pozostawiaj pomiaru, naprawy lub modyfikacji urządzenia przypadkowym serwisantom.

2. **Rutynowa kontrola**
- Upewnij się, aby sprawdzić urządzenie i adapter przed użyciem.
- Gdy używasz urządzenia, które nie było używane przez długi czas, upewnij się, czy działa poprawnie i bezpiecznie.

Zawartość opakowania

Pen	1 szt.
Kartridże	2 x M12 + 2 szt.
Instrukcja	1 szt.
Zasilacz oraz kabel	1 szt. / 1 szt.