

P

## BioAgePeel

Biorevitalizing



### IT ISTRUZIONI PER L'USO

BioAgePeel  
BioAgePeel è un dispositivo medico, un peeling chimico a base di acido tricloroacetico, acido mandelico e acido cogico ad azione esfoliante specifico per trattare difetti cutanei dovuti a lesioni acneiche e discromie cutanee. La natura intrinseca esfoliante del peeling elimina le cellule morte dello strato corneo e promuove il turnover cellulare favorendo per via indiretta la rigenerazione dermoepidermica associata nei processi di riparazione cellulare. Il BioAgePeel risulta quindi un trattamento ideale per ripristinare le condizioni fisiologiche ottimali della pelle.

Composizione:  
• BioAgePeel: acido tricloroacetico (20%), acido mandelico, acido cogico, eccipienti.

Indicazioni d'uso:

BioAgePeel  
Peeling chimico ad alta concentrazione di acido tricloroacetico che agisce a livello dell'intero spessore dell'epidermide, con lo scopo di trattare lesioni acneiche da moderate a gravi (papule, pustole, noduli e cisti) ed esiti cicatriziali conseguenti. Il mix di acidi determina un'esfoliazione

intensa e contemporaneamente un'azione depigmentante per il trattamento delle discromie maggiori. La rimozione degli strati esterni più danneggiati favorisce il rinnovamento cellulare con riduzione di rughe, cicatrici medio-superficiali e macchie cutanee.

BioAgePeel è indicato per:

- Trattamento delle lesioni acneiche e degli esiti cicatriziali conseguenti.

- Trattamento delle discromie cutanee

BioAgePeel è un peeling indicato per tutti i fototipi (I-VI) e per qualsiasi tipo di pelle.

Controindicazioni:

Non utilizzare il prodotto se sono in corso patologie e/o infezioni a carico della cute (dermatiti, herpese).

Non utilizzare in pazienti che manifestano sensibilità ad uno o più componenti; si consiglia di testare

il prodotto su una parte del corpo (es. cute dell'avambraccio, cute della zona retro auricolare) per monitorare la reazione cutanea di ciascun paziente.

Non utilizzare in gravidanza ed allattamento.

Non utilizzare il prodotto su persone di età inferiore ai 12 anni.

Avvertenze:

Dispositivo medico per uso esterno, riservato alla classe medica. Evitare il contatto con occhi e mucose.

Utilizzare con attenzione su pazienti che presentano cheloidi.

Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione o se quest'ultima risulta danneggiata, aperta o conservata in modo inopportuno.

Utilizzare BioAgePeel esclusivamente attenendosi alle presenti istruzioni per l'uso. Evitare l'esposizione dell'area trattata alla luce solare diretta o alle lampade UV sino alla completa scomparsa del rosore che potrebbe manifestarsi a seguito del trattamento.

Effetti collaterali:

- Leggero arrossamento delle zone trattate che scompare nell'intervallo di 24-48 ore

- Nel periodo successivo al peeling la pelle potrà presentarsi più secca

Nel caso in cui fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni dovessero manifestarsi è indicato sospendere il trattamento.

Protocollo d'uso:

Prima di iniziare il trattamento, il medico dovrà informare il paziente su composizione, avvertenze, controindicazioni e potenziali reazioni avverse associate a questo dispositivo.

Il trattamento si effettua ogni 7-8 giorni per almeno 4-6 sedute in base al parere del medico ed alla finalità del trattamento.

Metodi di applicazione:

Prima di iniziare il trattamento pulire l'area d'interesse del viso, collo, décolleté o altre aree limitate del corpo. Si raccomanda al medico l'uso di guanti al fine di proteggersi dalla natura acida del dispositivo e di proteggere le mucose e l'area oculare e perioculari del paziente per evitare il contatto con il prodotto. Prelevare con un dosatore 2-5ml di prodotto, la quantità

dovrebbe variare a seconda del tipo di pelle e delle caratteristiche del difetto cutaneo da trattare. Durante l'applicazione il paziente potrebbe avvertire un leggero pizzicore.

Rimuovere i residui di prodotto con una gauza imbevuta di acqua e proseguire con un'accorta pulizia della cute trattata.

Alla fine del trattamento applicare una crema emolliente.

La pelle risulterà morbida e levigata, con un lieve rosore che scompare in poche ore.

Confezionamento:

Una confezione di BioAgePeel contiene:

- 5 ampolle da 5 ml
- Le istruzioni per l'uso da leggere attentamente prima dell'uso del dispositivo

Conservazione:

Tenere il prodotto ben chiuso a temperatura compresa tra 5°C e 25°C.

Evitare il contatto diretto con la luce del sole. Utilizzare il dispositivo entro un mese dall'apertura.

Un eventuale inscrimento del colore non altera né compromette la sicurezza e l'efficacia del dispositivo.

Non gettare il prodotto nell'acqua di scarico in quanto presenta pericolosità per l'ambiente acquatico, smaltire con i farmaci eventuali residuo mantenuto nel contenitore originale.

EN

### INSTRUCTIONS FOR USE

BioAgePeel

BioAgePeel is a medical device, a chemical peel containing trichloroacetic acid, mandelic acid and

kojic acid with an exfoliating action, specifically formulated to treat skin problems caused by acne

and skin dyschromia. Thanks to its exfoliating properties, the peel removes dead cells from the

stratum corneum and promotes cell turnover, thus indirectly stimulating the associated dermal and

epidermal regeneration in cell repair processes. BioAgePeel is therefore an ideal treatment to restore the skin to its optimal, natural condition.

Composition:

BioAgePeel: trichloroacetic acid (20%), mandelic acid, kojic acid, excipients.

Directions for use:

BioAgePeel

A chemical peel with a high concentration of trichloroacetic acid, which acts on the entire thickness of the epidermis, specifically designed to treat moderate to severe acne lesions (papules, pustules, nodules and cysts) and related scarring. This mix of acids provides intense exfoliation with a

depigmenting action to treat severe dyschromia. By removing the most damaged outer layers, cell

renewal is promoted and wrinkles, medium-depth and surface scars, and skin spots are reduced.

BioAgePeel is suitable for:

- Treating acne lesions and related scarring
- Treating skin dyschromia

BioAgePeel is a peel suitable for all phototypes (I-VI) and any skin type.

Contraindications:

Do not use in case of skin diseases and/or infection (dermatitis, herpes).

Do not use if the patient is sensitive to one or more components; we recommend testing the product on an area of the body (e.g. forearm skin, skin behind the ear) to check how the skin of each patient reacts.

Do not use during pregnancy or breastfeeding.

Do not use on children under 12 years of age.

Warnings:

Medical device for external use, to be used by medical professionals only. Avoid contact with eyes

and mucous membranes. Use carefully if the patient has keloids.

Do not use the product past the expiry date shown on the package or if said package is damaged, opened or stored improperly.

Only use BioAgePeel in compliance with these instructions for use.

Avoid exposing the treated area to direct sunlight or UV lamps until any redness caused by the treatment has disappeared.

Side effects:

- Slight reddening of the treated areas, which goes away within 24-48 hours

- After the peel, the skin may become drier. Discontinue use in case of sensitivity or irritation.

Protocol of use:

Before starting treatment, the doctor must inform the patient about the composition, warnings, contraindications and potential adverse reactions associated with this device.

The treatment should be carried out every 7-8 days for at least 4-6 sessions according to medical advice and depending on the purpose of the treatment.

How to apply:

Before starting treatment, cleanse the area to be treated (face, neck, cleavage or other small areas of the body). The doctor is advised to use gloves for protection against the acidic nature of the device

and to protect the patient's mucous membranes, eye and periocular area, which must not come into contact with the product. Using a measuring cap, take 2-5 ml of product; the amount may vary

depending on the area of the body and the skin lesion to be treated. Pour the product into a clean container, then apply a thin layer with a brush or single-use gauze, carefully avoiding mucous membranes, and the eye and periocular area.

Recommended leave-on time: 4-6 minutes, the amount of time may vary depending on the type of skin and the characteristics of the skin problem to be treated. The patient may feel a slight tingling sensation during application.

Remove any product residue with a gauze soaked in water and thoroughly cleanse the treated area of skin.

Apply an emollient cream at the end of the treatment.

The skin will be soft and smooth, with a slight redness that goes away within a few hours.

Packaging:

One pack of BioAgePeel contains:

- five 5 ml ampoules

• Instructions for use to be read carefully before using the device

Storage:

Make sure the product is well closed and store at a temperature between 5°C and 25°C.

Avoid direct contact with sunlight.

Use within one month of opening.

If the colour goes darker, the safety and effectiveness of the device will not be altered or affected.

Do not dispose of in wastewater, since it is hazardous to the aquatic environment. Any product

residue must be disposed of in the appropriate pharmaceutical waste bin, in the original container.

FR

### MODE D'EMPLOI

BioAgePeel

BioAgePeel est un dispositif médical, un peeling chimique à base d'acide trichloracétique, d'acide mandélique et d'acide kojique exerçant une action exfoliante spécifique pour traiter les défauts

cutanés dus aux lésions acnéiques et aux dyschromies cutanées. La nature exfoliante intrinsèque du

peeling élimine les cellules mortes de la couche cornée et facilite le renouvellement cellulaire en favorisant indirectement la régénération dermo-épidermique associée aux processus de réparation cellulaire. BioAgePeel est donc un traitement idéal pour rétablir les conditions physiologiques optimales de la peau.

Composition:

BioAgePeel : acide trichloroacétique (20%), acide mandélique, acide kojique, excipients.

### MODE D'EMPLOI

BioAgePeel

Peeling chimique avec une concentration élevée d'acide trichloracétique qui agit au niveau de toute

l'épaisseur de l'épiderme, dans le but de traiter les lésions acnéiques modérées à sévères (papules, pustules, nodules et kystes) et les cicatrices qui en découlent. Le mélange d'acides détermine une

exfoliation intense et en même temps une action dépigmentante pour le traitement des dyschromies

majeures. L'élimination des couches externes les plus endommagées favorise le renouvellement cellulaire avec une réduction des rides, des cicatrices moyennes superficielles et des taches cutanées.

BioAgePeel est recommandé pour :

- Le traitement des lésions acnéiques et des cicatrices qui en découlent
- Le traitement des dyschromies cutanées

BioAgePeel est un peeling adapté à tous les phototypes (I-VI) et à tout type de peau.

### CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser le produit en cas de pathologies et / ou d'infections affectant la peau (dermatite, herpès).

Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité à un ou plusieurs composants ; il est recommandé de tester le produit sur une partie du corps (par exemple la peau de l'avant-bras ou de la zone rétro-auriculaire) pour tester la réaction cutanée de chaque patient.

Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement.

Ne pas utiliser le produit sur des personnes de moins de 12 ans.

### MISES EN GARDE

Dispositif médical à usage externe, réservé à la classe médicale. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

Utiliser avec prudence sur les patients atteints de chéloïdes.

Ne pas utiliser le produit au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage ou si celui-ci est endommagé, ouvert ou mal stocké.

Utiliser BioAgePeel exclusivement en respectant ces instructions d'emploi.

Éviter d'exposer la zone traitée aux rayons directs du soleil ou aux lampes UV jusqu'à disparition

complète des rougeurs pouvant survenir suite au traitement.

### EFFECTS SECONDAIRES

- Légère rougeur des zones traitées qui disparaît dans l'intervalle de 24 à 48 heures.

En cas de survenue de phénomènes de sensibilisation ou d'irritation, il est recommandé d'interrompre le traitement.

### PROTOCOLE D'UTILISATION

Avant de commencer le traitement, le médecin devra informer le patient de la composition, des

mises en garde, des contre-indications et des effets secondaires potentiels associés à ce dispositif.

Le traitement s'effectue tous les 7 à 8 jours pendant au moins 4 à 6 séances en fonction de l'avancement du

médecin et de l'objectif du traitement.

### MÉTHODES D'APPLICATION

Avant de commencer le traitement, nettoyer la partie intéressée du visage, du cou, du décolleté ou

d'autres zones limitées du corps. Il est recommandé au médecin de porter des gants afin de se

protéger de la nature acide du dispositif et de protéger les muqueuses ainsi que les yeux et la zone

périoculaire du patient pour éviter tout contact avec le produit. Avec un doseur, prendre 2 à 5 ml de produit (la quantité peut varier en fonction de la zone d'intérêt et de la lésion cutanée à traiter). Verser le produit dans un récipient propre et appliquer une fine couche avec une brosse ou une gaze jetable, en évitant soigneusement les muqueuses et les zones oculaire et périoculaire.

Il est recommandé de laisser agir : 4 à 6 minutes, le temps peut varier en fonction du type de peau et des caractéristiques du défaut cutané à traiter. Pendant l'application, le patient peut ressentir de légers picotements.

Éliminer les résidus de produit avec une gaze imbibée d'eau et poursuivre avec un nettoyage en profondeur de la peau traitée.

À la fin du traitement, appliquer une crème émolliente.

La peau sera douce et lisse, avec une légère rougeur qui disparaîtra en quelques heures.

Emballage :

Un emballage de BioAgePeel contient :

- 5 ampoules de 5 ml
- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le dispositif.

Conservation :

Conserver le produit bien fermé à une température comprise entre 5°C et 25°C. Éviter tout contact direct avec la lumière du soleil.

Utiliser le produit dans le mois suivant son ouverture.

Tout assombrissement de la couleur n'altère ni compromet la sécurité et l'efficacité du produit.

Ne pas jeter le produit dans les eaux usées car il présente un danger pour le milieu aquatique ; jeter tout résidu laissé dans le récipient d'origine avec les médicaments.

### ES

### INSTRUCCIONES DE USO

BioAgePeel  
BioAgePeel es un dispositivo médico, un peeling químico a base de ácido tricloroacético, ácido mandélico y ácido cójico con una acción exfoliante especial para tratar los defectos de la piel debidos

a lesiones del acné y discromías de la piel.

BioAgePeel es un dispositivo de BioAgePeel.

Peeling BioAgePeel químico con una alta concentración de ácido tricloroacético que actúa a nivel de

todo el espesor de la epidermis, con el fin de tratar las lesiones de acné de moderadas a graves

(pápulas, pústulas, nódulos y quistes) y las consiguientes resultados de las cicatrices. La mezcla de

ácidos da lugar a una intensa exfoliación y, al mismo tiempo, a una acción despigmentante para el tratamiento de las discromías mayores. La eliminación de las capas externas más dañadas favorece la renovación celular con la reducción de las arrugas, las cicatrices de superficie media y las manchas de la piel.

BioAgePeel está indicado para:

- Tratamiento de las lesiones del acné y de los consiguientes resultados de las cicatrices
- Tratamiento de las discromías de la piel

BioAgePeel es un peeling indicado para todos los fototipos (I-VI) y todos los tipos de piel.

Contraindicaciones:

No use el producto si tiene algunas patologías y/o infecciones cutáneas (dermatitis, herpес).

No use el producto en pacientes con sensibilidad a uno o más componentes; se recomienda probar el producto en una parte del cuerpo (por ejemplo, la piel del antebrazo, la piel de la parte posterior de la oreja) para controlar la reacción cutánea de cada paciente.

Está contraindicado durante el embarazo y la lactancia.

No use el producto en niños menores de 12 años.

Advertencias:

Dispositivo médico para uso externo, reservado sólo para uso médico. Evite el contacto con ojos y mucosas.

Use con cuidado en pacientes con queloides.

No use el producto una vez superada la fecha de cad

El tratamiento se lleva a cabo cada 7 u 8 días durante al menos 4 ó 6 sesiones, según el consejo médico y el propósito del tratamiento. Métodos de aplicación:

Antes de comenzar el tratamiento, limpia la zona de interés de la cara, el cuello, el escote u otras zonas limitadas del cuerpo. Se recomienda que el médico use guantes para protegerse de la naturaleza ácida del dispositivo y para proteger las mucosas y el área ocular y periocular del paciente para evitar el contacto con el producto. Extraiga con un dosificador 2-5ml de producto, la cantidad puede variar dependiendo del área de interés y de la lesión cutánea que tratar. Vierta el producto en un recipiente limpio y aplique una capa fina con un pincel o una gasa desechable, evitando cuidadosamente las mucosas y las zonas oculares y perioculares. Se aconseja dejar en reposo: 4-6 minutos, el tiempo puede variar según el tipo de piel y las características del defecto cutáneo que tratar. Durante la aplicación el paciente puede sentir una ligera sensación de hormigueo. Elimine los residuos del producto con una gasa empapada en agua y continúe con una limpieza a fondo de la piel tratada.

Al final del tratamiento aplique una crema emoliente. La piel quedará suave y lisa, con un ligero enrojecimiento que desaparecerá en unas pocas horas.

Empaquetado:  
Un envase de BioAgePeel contiene:  
•5 ampollas de 5 ml  
•Las instrucciones de uso deben leerse atentamente antes de usar el dispositivo.

Conservación:

Conserve el producto bien cerrado a una temperatura entre 5°C y 25°C. Evite el contacto directo con la luz del sol.

Use el dispositivo dentro de un mes de la apertura.

El posible oscurecimiento del color no altera o compromete la seguridad y la eficacia del dispositivo.

No elimine el producto en las aguas residuales, ya que es peligroso para el medio ambiente acuático, elimine con los medicamentos cualquier residuo conservado en el envase original.

#### DE GEBRAUCHSANWEISUNG

BioAgePeel  
BioAgePeel ist ein Medizinprodukt, ein chemisches Peeling auf der Basis von Trichloressigsäure,

Mandelsäure und Kojisäure mit spezifischer exfolierender Wirkung für die Behandlung von aufgrund von Akne entstandenen Hautdefekten und Hautdyschromien. Die exfolierende Natur des Peelings entfernt abgestorbene Zellen aus dem Stratum corneum und fördert den Zellaustausch, indem sie

indirekt die dermo-epidermale Regeneration fördert, die mit Zellreparaturprozessen verbunden ist.

BioAgePeel ist daher eine ideale Behandlung zur Wiederherstellung optimaler physiologischer Bedingungen der Haut.

Zusammensetzung:

BioAgePeel: Trichloressigsäure (20%), Mandelsäure, Kojisäure, sonstige Inhaltsstoffe.

Hinweise zur Verwendung:

BioAgePeel  
Chemisches Peeling mit einer hohen Konzentration an Trichloressigsäure, das auf der gesamten Stärke der Epidermis wirkt, mit dem Ziel, mittelschwere bis schwere Akneläsionen (Papeln, Pusteln, Knötchen und Zysten) und daraus resultierende Narbenbildung zu behandeln. Die Mischung der Säuren erzielt ein intensives Peeling und gleichzeitig eine depigmentierende Wirkung bei der Behandlung von schweren Dyschromien.

Die Entfernung der am meisten geschädigten äußeren Schichten fördert die Zellerneuerung mit Reduzierung von Falten, mittel-oberflächlichen Narben und Hautflecken. BioAgePeel ist für Folgendes angezeigt:

•Behandlung von Akneläsionen und daraus entstehender Narbenbildung

•Behandlung von Hautdyschromien

BioAgePeel ist ein Peeling, das für alle Fototipos (I-VI) und alle Hauttypen geeignet ist.

Gegenanzeigen:  
Das Produkt nicht verwenden, wenn Hautkrankheiten und/oder Infektionen vorliegen (Dermatitis, Herpes).

Nicht bei Patienten mit Empfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen anwenden.

Es wird empfohlen, das Produkt an einem Körperteil (z.B. Haut am Unterarm, Haut auf der Rückseite des Ohres) zu testen, um die Reaktion der Haut bei jedem Patienten zu überwachen.

Während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht verwenden.

Das Produkt nicht bei Personen unter 12 Jahren verwenden.

Vorsichtshinweise:  
Medizinprodukt zur äußerlichen Anwendung durch Ärzte. Den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.

Bei Patienten mit Keloiden mit Vorsicht anwenden.

Das Produkt nicht über das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum hinaus oder bei beschädigter, geöffneter oder unsachgemäß gelagerter Verpackung verwenden.

BioAgePeel ausschließlich unter Befolgung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verwenden.

Den behandelten Bereich nicht direkt Sonnenlicht oder UV-Lampen aussetzen, bis die Rötungen, die als Folge der Behandlung auftreten können, vollständig verschwunden sind.

Nebenwirkungen:

- Leichte Rötung der behandelten Bereiche, die in 24-48 Stunden verschwindet.
- In der Zeit nach dem Peeling kann die Haut trockener sein.
- Im Falle einer Sensibilisierung oder Reizungen wird empfohlen, die Behandlung auszusetzen.

#### Protokoll zur Nutzung:

Vor Beginn der Behandlung muss der Arzt / die Ärztin den Patienten / die Patientin über die Zusammensetzung, die Warnhinweise, die Gegenanzeigen und mögliche Nebenwirkungen im Zusammenhang mit diesem Produkt informieren.

Die Behandlung wird alle 7-8 Tage für mindestens 4-6 Sitzungen durchgeführt, je nach ärztlichem Rat und Zweck der Behandlung.

#### Anwendungsmethode:

Vor Beginn der Behandlung die betreffenden Stellen im Gesicht, am Hals, am Dekolleté oder in anderen begrenzten Bereichen des Körpers reinigen. Dem Arzt wird empfohlen, Handschuhe zum Schutz gegen die säurehaltige Beschaffenheit des Produkts zu tragen und die Schleimhäute sowie die Augen- und Periokularpartie des Patienten zu schützen, um dort den Kontakt mit dem Produkt zu vermeiden. Mit einem Dosierer 2-5 ml Produkt entnehmen. Die Menge kann je nach dem zu behandelnden Bereich und der Hautläsion variieren. Das Produkt in einen sauberen Behälter geben

und mit einem Einwegpinsel oder einem Stück Mull eine dünne Schicht auftragen, wobei

Schleimhäute sowie die Augen- und Periokularpartie sorgfältig zu vermeiden sind.

Empfohlene Einwirkungszeit: 4-6 Minuten, Die Zeit kann je nach Hauttyp und den Merkmalen des zu behandelnden Hautdefektes variieren.

Während der Behandlung ist es möglich, dass der Patient ein leichtes Kribbeln spürt.

Die Produktreste mit Wasser getränktem Mull entfernen und mit einer gründlichen Reinigung der behandelten Haut fortfahren.

Am Ende der Behandlung eine lindernde Creme auftragen.

Die Haut fühlt sich weich und glatt an, mit einer leichten Rötung, die in wenigen Stunden verschwindet.

#### Verpackung:

Eine Packung BioAgePeel enthält:

•5 Fläschchen zu 5 ml

•Die Gebrauchsanweisung, die vor der Verwendung des Produkts aufmerksam durchzulesen ist.

#### Aufbewahrung:

Das Produkt gut verschlossen bei einer Temperatur zwischen 5°C und 25°C aufbewahren.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Nach dem Öffnen innerhalb von einem Monat verwenden.

Eine möglicherweise auftretende dunklere Färbung des Produkts beeinträchtigt weder dessen Sicherheit noch die Wirksamkeit.

Das Produkt nicht in den Wasserablauf schütten, das es für die Gewässer gefährlich ist, eventuelle Produktrückstände im Originalbehälter so wie Arzneimittel entsorgen.

#### PL STOSOWANIE

BioAgePeel  
Peeling BioAgePeel to wybór medyczny zawierający kwas trójchloroctowy, migdałowy i kojowy o działaniu zluszczającym, specjalnie opracowany do leczenia problemów skórnnych spowodowanych trądzikiem i dyschromią skórą. Dzięki swoim właściwościom zluszczającym, peeling usuwa martwe komórki z warstwy rogowej naskórka i wspomaga odnowę komórkową, tym samym pośrednio stymuluje regenerację tkankową, spłycając zmarszczki i ewentualne blizny. BioAgePeel jest zatem idealnym zabiegem przywracającym skórze optymalny, naturalny stan.

#### Skład:

BioAgePeel : kwas trójchloroctowy (20%), kwas migdałowy, kwas kojowy, substancje pomocnicze.

#### Stosowanie:

Peeling chemiczny z wysokim stężeniem kwasu trójchloroctowego, działający na całą grubość naskórka, przeznaczony specjalnie do leczenia umiarkowanych i ciężkich zmian trądzikowych (grudki, krosty, guzki i cysty) oraz związanych z nimi blizn. Ta mieszanka kwasów zapewnia intensywne zluszczenie z działaniem redukującym przebarwienia, aby leczyć ciężką dyschromię. Usunięcie najbardziej zniszczonych warstw zewnętrznych naskórka przyspiesza odnowę komórkową, redukuje zmarszczki, blizny o średniej głębokości i powierzchni oraz plamy na skórze.

BioAgePeel jest odpowiedni do:

•Leczenia zmian trądzikowych i związanych z nimi blizn

•Leczenia dyschromii skóry

BioAgePeel do peelingu odpowiadni dla wszystkich fototypów (I-VI) i każdego rodzaju skóry.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku chorób skóry i lub infekcji (zapalenie skóry, opryszczka).

Nie stosować, jeśli pacjent jest wrażliwy na jeden lub więcej składników; zalecane jest

przelestowanie produktu na niewielkim obszarze ciała (np. skóra przedramienia, skóra za uchem),

aby sprawdzić, jak reaguje skóra pacjenta.

Nie stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

#### Ostrzeżenia:

Wyrób medyczny do użytku zewnętrznego, do użycia wyłącznie przez profesjonalistów z zakresu medycyny. Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Należy stosować ostrożnie, jeśli pacjent ma bliznowce.

Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu lub jeśli

opakowanie jest uszkodzone, otwarte lub niewłaściwie przechowywane.

Należy stosować BioAgePeel wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją stosowania.

Należy unikać wystawiania obszaru poddanego zabiegowi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub lamp UV, dopóki zaczernienie spowodowane zabiegiem nie zniknie.

Skutki uboczne:

•Lekkie zaczernienie leczonych obszarów, które ustępuje w ciągu 24-48 godzin

•Po zastosowaniu peelingu skóra może stać się bardziej sucha

Przewracać stosowanie w przypadku nadwrażliwości lub podrażnienia.

Protokoł użycia:

Przed rozpoczęciem zabiegu lekarz musi poinformować pacjenta o składe, ostrzeżeniach, przeciwwskazaniach i potencjalnych działań niepożądanych związanych z tym wyrobem medycznym.

Zabieg należy wykonywać co 7-8 dni w serii 4-6 zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarza i w zależności od oczekiwany efektu zabiegu.

Jak aplikować:

Przed przystąpieniem do zabiegu należy oczyścić obszar poddawany zabiegowi (twarz, szyja, dekolty lub inne). Zaleca się stosowanie ręcznika w celu ochrony przed kwaśnym odczynem wyrobu oraz ochrony błon śluzowych, oczu i okolicy oczu pacjenta, które nie mogą mieć kontaktu z produktem.

Korzystając z miarki należy pobrać 2-5 ml produktu; ostateczna ilość może się różnić w zależności od obszaru ciała poddawanego zabiegowi oraz zmiany skórnej. Wlać produkt do czystego pojemnika, a następnie nałożyć cienką warstwę za pomocą pędzelka lub jednorazowej gazy, ostrożnie omijając błony śluzowe oraz okolice oczu.

Zalecany czas pozostawienia na skórze: 4-6 minut, ten czas może się różnić w zależności od rodzaju skóry i typu leczzonego problemu skórrego. Podczas aplikacji pacjent może odczuwać lekkie mrówknięcie.

Następnie należy usunąć wszelkie pozostałości produktu gazą zamoczoną w wodzie i dokładnie oczyścić obszar skóry poddawany zabiegowi.

Na koniec zabiegu nałożyć krem nawilżająco-lagodzący.

Skóra po zabiegu jest miękka i gładka, może wystąpić lekkie zaczernienie, które samoistnie ustępuje w ciągu kilku godzin.

Opakowanie:

Jedno opakowanie BioAgePeel zawiera:

•pięć ampulek o pojemności 5 ml

•Instrukcję stosowania, którą należy uważnie przeczytać przed zastosowaniem wyrobu medycznego

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.

Należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Należy zużyć w ciągu miesiąca od otwarcia.

Jeśli kolor produktu stanie się ciemniejszy, bezpieczeństwo i skuteczność wyrobu medycznego nie ulegnie zmianie ani nie wpłynie na efekt zabiegu.

Nie należy wyrzucać produktu do ścieków, ponieważ jest on niebezpieczny dla środowiska wodnego.

Wszelkie pozostałości produktu należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady

farmaceutyczne w oryginalnym opakowaniu.

#### Description of symbols

IT - Simboli sulla confezione


EN - Symbols on the package

FR - Symboles sur l'emballage

ES - Símbolos del paquete

DE - Symbole auf der Verpackung

PL - Symbole na opakowaniu

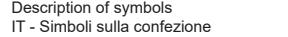

IT - Consultare le istruzioni per l'uso

EN - Refer to the instructions for use

FR - Voir le mode d'emploi

ES - Consulte las instrucciones de uso

DE - Die Gebrauchsanweisung

einsehen

PL - Zapoznaj się z instrukcją



IT - Attenzione, consultare i documenti allegati al dispositivo


EN - Attention, refer to the documents attached to the device

FR - Attention, consulter les documents joints au dispositif

ES - Atención, consulte los documentos adjuntos al dispositivo

DE - Achtung: Die dem Produkt beigelegenden Unterlagen einsehen

PL - Uwaga : zapoznaj się z informacjami dodatkowymi do produktu

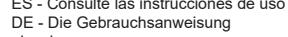

IT - Tenere al riparo dalla luce diretta del sole


EN - Keep away from direct sunlight

FR - Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil

ES - Mantener protegido de la luz directa del sol

DE - Vor direktem Sonnenlicht schützen

PL - Chronić przed bezpośredniem działaniem promieni słonecznych

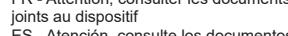

IT - Dati di scadenza

EN - Expiration date

FR - Date de péremption

ES - Fecha de caducidad

DE - Verfallsdatum

PL - Termin przydatności



IT - Data di scadenza

EN - Batch number

FR - Numéro de lot

ES - Número de lote

DE - Chargenummer

PL - Numer partii



5 °C

25 °C

IT - Limiti della temperatura di conservazione

EN - Storage temperature range

FR - Limites de température de conservation

ES - Límites de la temperatura de conservación

DE - Aufbewahrungsstempel

PL - Temperatura przechowywania



0425

IT - Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/EEC relativa ai dispositivi medici.

0425 è il numero dell'Organismo Notificato

EN - CE marking compliant with directive 93/42/EEC on medical devices. 0425 is the number of the notified body

FR - Marque CE conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

0425 est le

numéro de l'organisme notifié

ES - Marca CE de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE en materia de dispositivos médicos. 0425 es el

número del organismo notificado

DE - CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

0425 ist die Kennzeichnung

Nummer der benannten Stelle

PL - Oznaczenie CE zgodne z dyrektywą 93/42/EEC (MDD). 0425 to numer jednostki notyfikowanej



Rev. 00

INFINI

PREMIUM PEEL

P

BioAgePeel

Biorevitalizing

Medical Device

Dispositivo Medico

CE

0425