
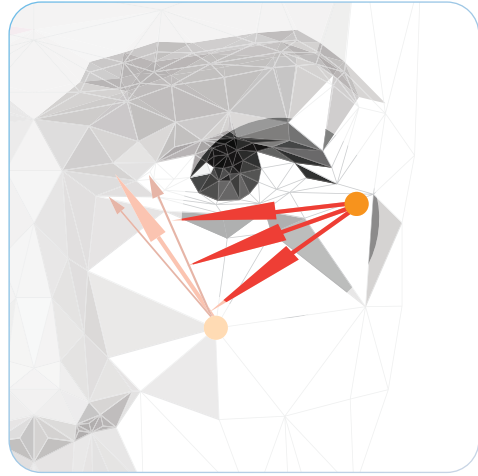



— Procedura zabiegu Juvelook w okolicy oka —

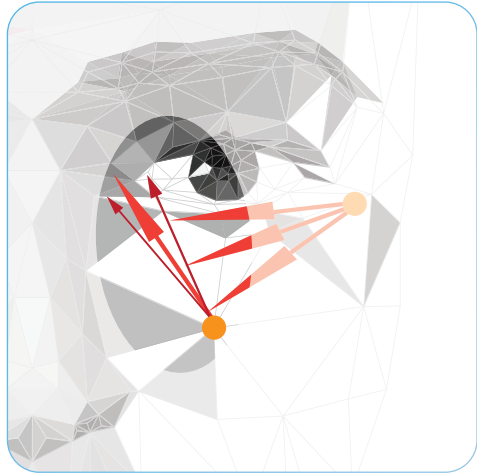

DOLINA ŁEZ – KANIULA
0,2 ml – technika liniowa wsteczna






DOLNA POWIEKA – KANIULA
0,3 ml – technika wachlarzowa

Procedury zabiegów Lenisna
na twarzy i szyi

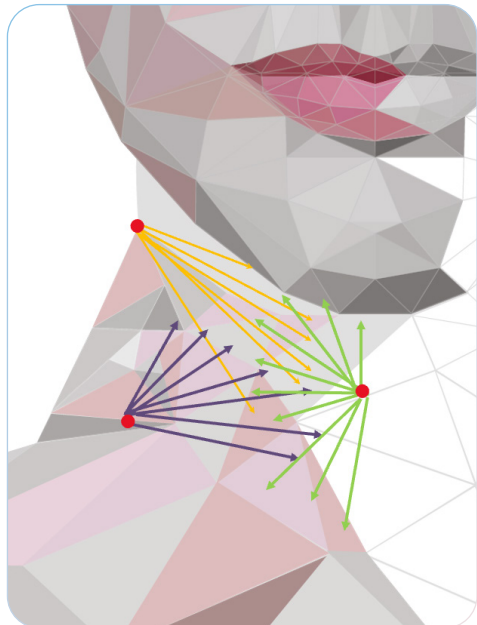

Aktualizacja: 25.10.2023

— Procedury zabiegów Lenisna na ciele —

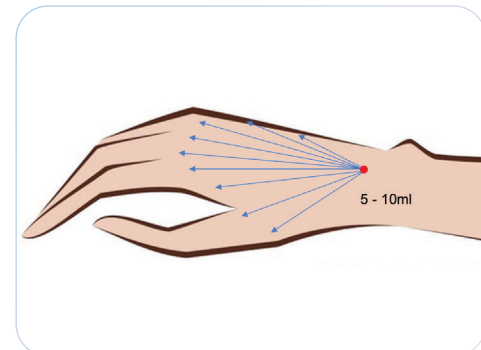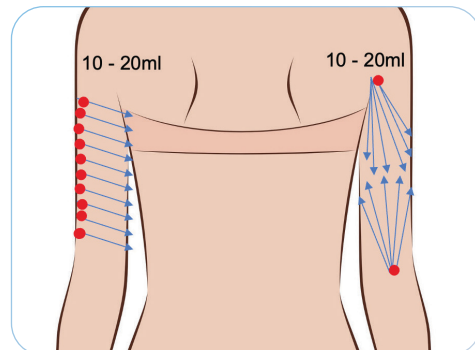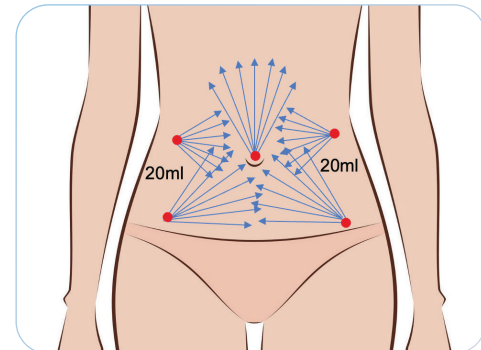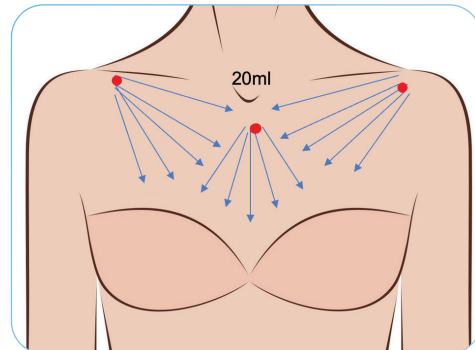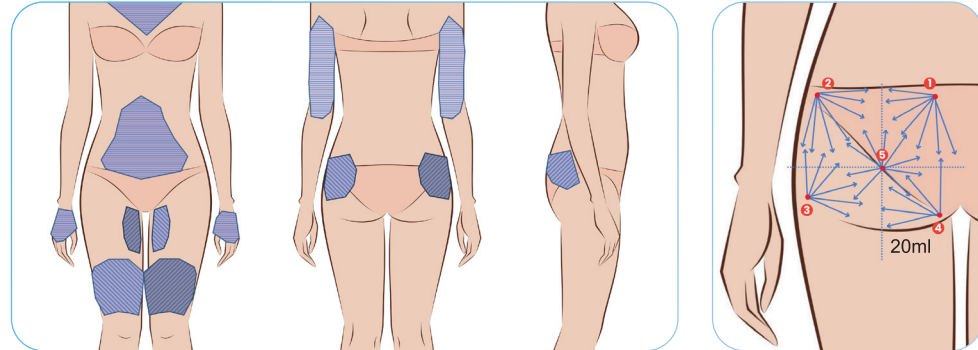

LENISNA®

JEDYNE NA ŚWIECIE
CZĄSTECZKI PDLLA
O STRUKTURZE
SIATECZKOWATEJ



Zwiększenie objętości



Leczenie wiotkości skóry



Naturalny efekt konturowania twarzy



Naturalny efekt konturowania ciała



Terapia głębokich blizn



Redukcja głębokich zmarszczek i bruzd

JuveLook

NAJMNIJSZE
MIKROSFERY PDLLA
STWORZONE Z MYŚLĄ
O IDEALNEJ
TEKSTURZE SKÓRY



Wypełnienie doliny łez i redukcja drobnych zmarszczek



Zmniejszenie wiotkości skóry



Poprawa tekstury skóry



Terapia blizn zanikowych



Rozjaśnienie skóry



Leczenie rozstępów

PROCEDURY ZABIEGOWE

Hybrydowe Stymulatory Kolagenu PDLLA + HA

ZESKANUJ KOD QR, ABY ZOBACZYĆ
MATERIAŁY DLA LEKARZY >>



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI ORAZ WIELKIEJ BRYTANII
BeautyEurope.eu Sp. z o.o. biuro@beautyEurope.eu
ul. Skowronków 10 +48 518 225 625
58-500 Jelenia Góra www.beautyEurope.eu

NIP: PL6112803776

KRS: 0000808299

REGON: 384621339

Technika podania



Juvelook jest preparatem zaprojektowanym do okolic bardzo trudnych i delikatnych – okolica oka (dolina łez, dolna powieka) oraz do mezoterapii skóry.

Okolica oka:

zabieg wykonujemy tylko kaniulą od 25 do 27G, 40–50 mm.

Rekomendacje:

celem równomiernego rozprowadzenia preparatu dokonaj masażu w miejscu podania.

Mezoterapia urządzeniem:

preferowane wykonanie zabiegu mezoterapii urządzeniem typu injector, na głębokość 1,2 do 2,2 mm, bolusy od 8µl do 25µl.

Rekomendujemy urządzenie RF Combo Jector z jednoczesną radiofrekwencją.

Lenisna jest preparatem zaprojektowanym do podania głębokiego, podskórnego lub nadokostnowego. Podstawowa technika oparta jest na pracy kaniulą, alternatywne postępowanie – praca igłą:

- Iniekcje kaniulą od 22 do 25G, 50–70 mm podając do: fałdów nosowo-wargowych techniką liniową kanapkową, okolicy linii marionetki techniką wachlarzową, bocznej części twarzy techniką wachlarzową.
- Iniekcje igłą 25G głęboko: modelowanie policzka, modelowanie linii marionetki, wypełnienie skroni, podanie do okolicy okołogruszkowatej.

Rekomendacje:

celem równomiernego rozprowadzenia preparatu dokonaj masażu w miejscu podania.

Protokół przygotowania zawiesiny

Juvelook

1. Za pomocą igły i strzykawki pobierz 7 ml Aqua pro inj. i 1 ml Lignocainy 2% LUB 8 ml 0,9% NaCl – bez Lignocainy
2. Po uprzedniej dezynfekcji gumowego korka fiolki wstrzyknij roztwór do fiolki z preparatem (używając igły i strzykawki).
3. Wymieszaj 30 min w urządzeniu Vortex.

Po wymieszaniu 8 ml preparatu jest gotowe do wykonania zabiegu.



Urządzenie Vortex

Czynności wspólne:

Umieść fiolkę w urządzeniu Vortex – czas wytrząsania 30 min.

Uwaga! Po dodaniu wody sterylnej lub soli fizjologicznej wstrząsaj preparatu, umieść go w urządzeniu Vortex.

Przyrządy:

- woda sterylna do iniekcji
- Lignocaina 2%
- NaCl 0,9% - opcjonalnie
- Vortex
- igła 21G, 50 mm
- strzykawka Luer-Lok 5 ml
- preparat do dezynfekcji
- 2 x strzykawka 20 ml
- łącznik do strzykawek

LENISNA

TWARZ

1. Za pomocą igły i strzykawki pobierz 5 ml Aqua pro inj. i 1 ml Lignocainy 2% LUB 6 ml 0,9% NaCl – bez Lignocainy.
2. Po uprzedniej dezynfekcji gumowego korka fiolki wstrzyknij roztwór do fiolki z preparatem (używając igły i strzykawki).
3. Wymieszaj 30 min w urządzeniu Vortex.
4. Do strzykawki 20 ml nabierz 6 ml Lenisny z Lignocainą z fiolki i 10 ml Aqua pro inj. (do objętości 16 ml).
5. Mieszaj 4 razy w dwóch połączonych strzykawkach 20 ml.

CIAŁO

1. Do strzykawki 20 ml nabierz 6 ml Lenisny z Lignocainą z fiolki i 14 ml Aqua pro inj. (do objętości 20 ml).
2. Mieszaj 4 razy w dwóch połączonych strzykawkach 20 ml.

Najczęściej popełniane błędy:

- złe przygotowanie preparatu
- zbyt płytkie podanie preparatu
- nieodpowiednia ilość aplikowanego preparatu
- niewłaściwe odstępy między zabiegami
- zbyt krótkie odstępy po innych zabiegach medycyny estetycznej

Charakterystyka produktów

Juvelook

LENISNA

Składniki aktywne	42,4 mg Poly-D,L-Lactic Acid(PDLLA), 7,5 mg Hyaluronic Acid	170 mg Poly-D,L-Lactic Acid(PDLLA), 30 mg Hyaluronic Acid
Opakowanie	1 fiolka x 50 mg	1 fiolka x 200 mg
Wielkość cząsteczki	20-40 µm	40-80 µm
Głębokość podania	głęboko śródskórnio, z wyjątkiem okolicy oka – tutaj tkanka podskórna i kaniula!	warstwa podskórna, nadokostnowo
Trwałość efektu	12-18 miesięcy	12-18 miesięcy
Rekonstytucja	8 ml sterylnej wody lub roztworu soli fizjologicznej	TWARZ: 16 ml sterylnej wody lub roztworu soli fizjologicznej CIAŁO: 20 ml sterylnej wody lub roztworu soli fizjologicznej
Metoda iniekcji	INJECTOR (igły 30-32G), kaniula od 25 do 27G, 40-50 mm do doliny łez Inne metody podania: • RF Combo Jector • Radiofrekwencja igłowa • Mirajet	kaniula od 22 do 25G, 50-70 mm, igła 25G

Niewykorzystany preparat można pozostawić na 72 godziny* w lodówce. Po wyciągnięciu z lodówki preparat należy:

- odstawić do osiągnięcia temperatury pokojowej – ok. 15 min
- wymieszać przed podaniem w urządzeniu Vortex – 5 min
- po zakończonej procedurze wytrząsania postaw fiolkę na stole i odczekaj 3 min

Uwaga! Nie podajemy zimnego preparatu!

*Standard w praktyce lekarzy koreańskich, którzy stosują preparat od 3 lat – przechowywanie trwa nawet do 30 dni, co znajduje również uzasadnienie w literaturze.